


Dedalus
SOFTWARE FOR HEALTHCARE

**Istruzioni Operative
Suite Armonia
per Integrazione con lo
Screening**

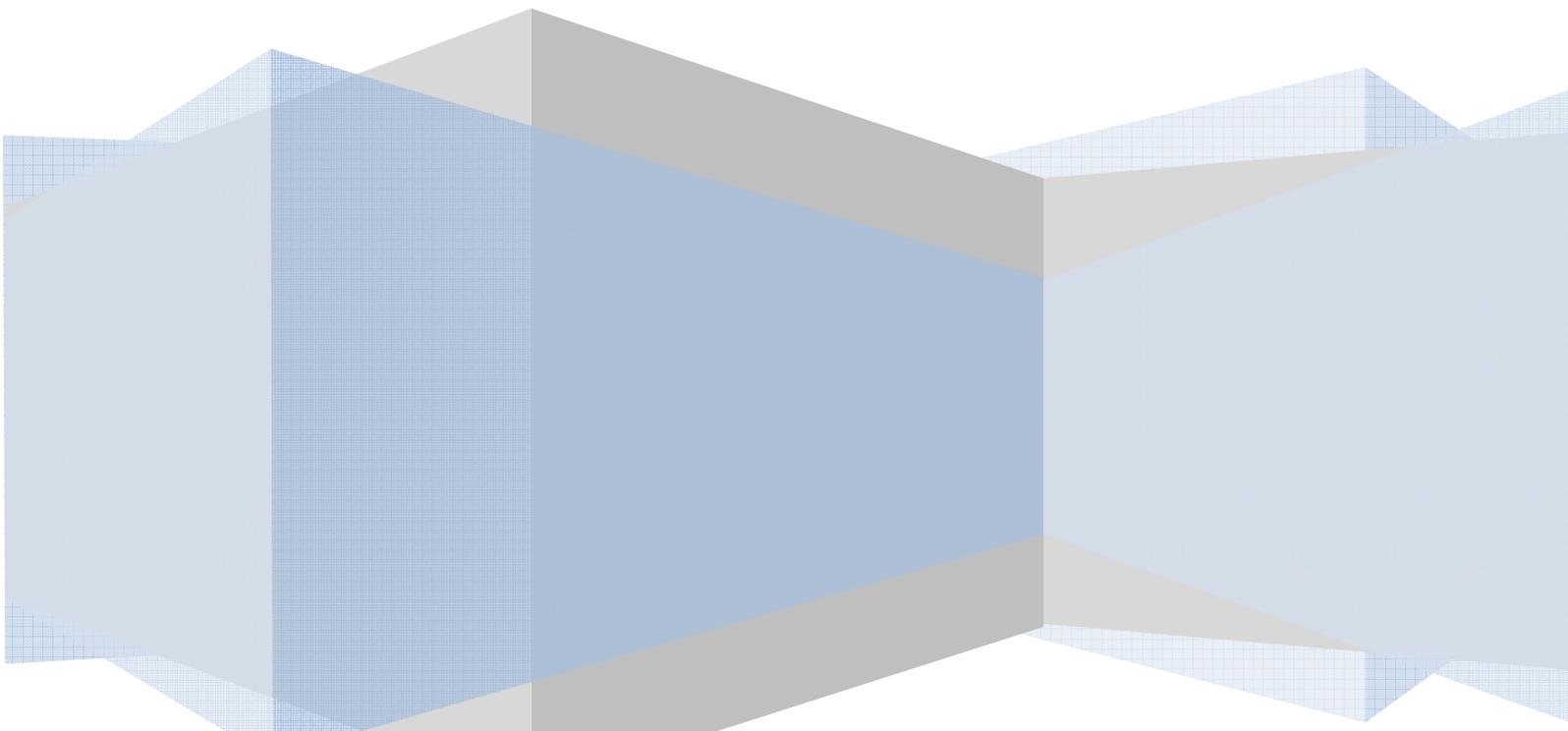


1 Istruzioni per il corretto utilizzo dell' Import esami da Screening

E' possibile accedere a questa funzione anche dalla Tool - bar cliccando l'icona evidenziata:



La funzione permette il recupero degli esami di Screening da Eurosoft. La configurazione di questa integrazione viene effettuata in Parametri generali → scheda Esame → pulsante Integr. Screening 2000.

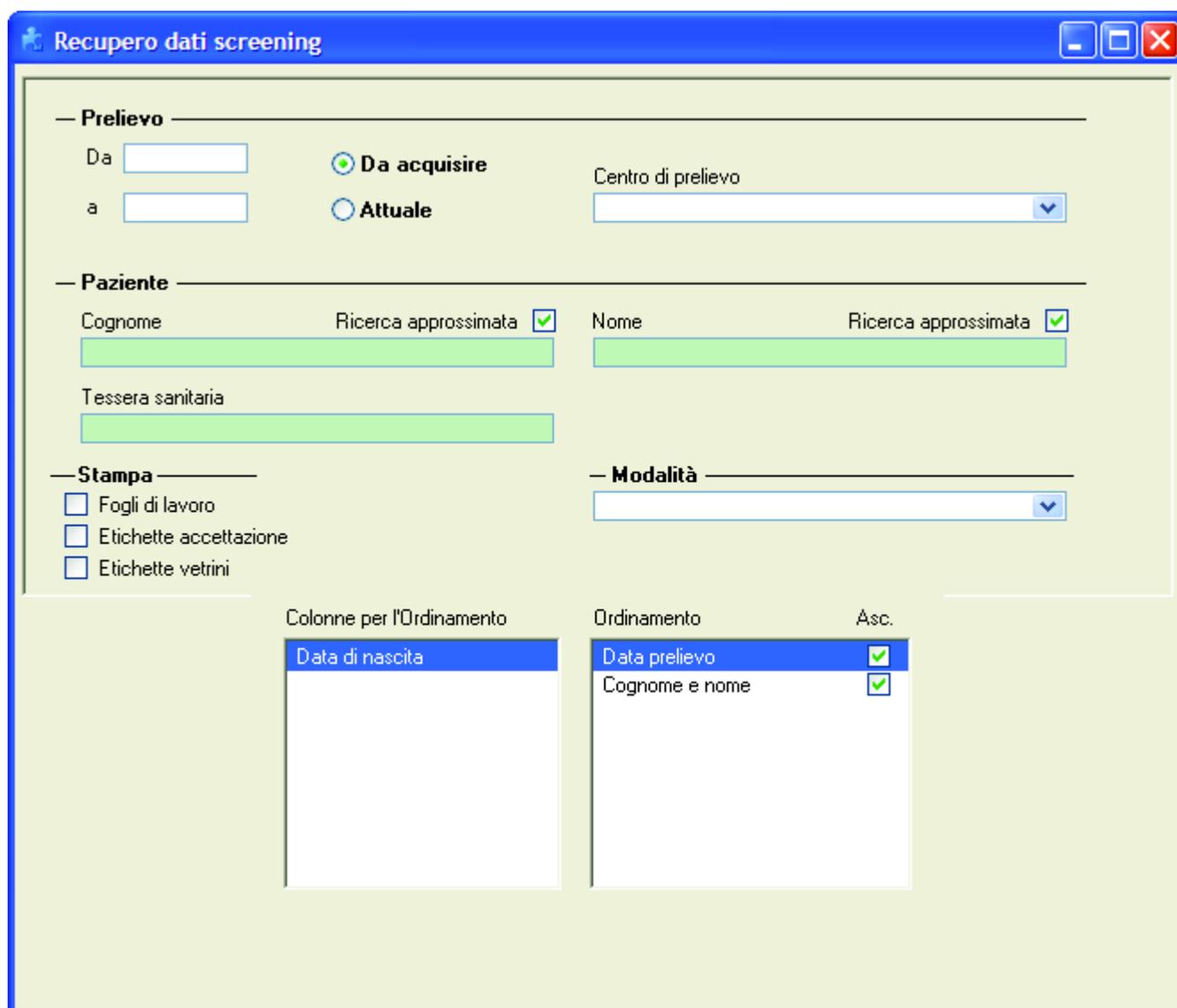

Recupero dati screening

— Prelievo —

Da **Da acquisire** Centro di prelievo

a **Attuale**

— Paziente —

Cognome Ricerca approssimata Nome Ricerca approssimata

Tessera sanitaria

— Stampa —

Fogli di lavoro

Etichette accettazione

Etichette vetrini

— Modalità —

Colonne per l'Ordinamento

Data di nascita

Ordinamento


Data prelievo	Asc. <input checked="" type="checkbox"/>
Cognome e nome	Asc. <input checked="" type="checkbox"/>

Nella finestra si possono impostare alcuni filtri:


- ♦ **Prelievo:** è possibile inserire un intervallo di valori
- ♦ **Stato:** la scelta può essere fra

Da acquisire

Attuale. in questo caso gli stati disponibili sono ristretti a quelli previsti in sede di configurazione come esame accettato ed esame da accettare:

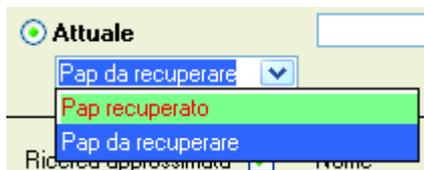

- ♦ **Centro di prelievo:** scelti fra gli Istituti con check Gestito come ambulatorio
- ♦ Identificazione **Paziente:** Cognome, Nome o Tessera Sanitaria.
- ♦ **Modalità:** si può scegliere la modalità di esami fra Screening, ThinPrep o entrambi

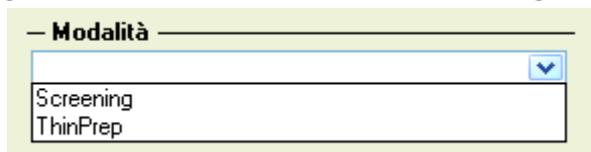



E' infine possibile selezionare quali **stampe** effettuare automaticamente al momento dell'acquisizione ed i criteri di **ordinamento** della lista degli esami da acquisire.

Fra i tasti funzione sono disponibili:



Importa file. Permette di importare gli esami via file di testo tramite la seguente finestra di dialogo:

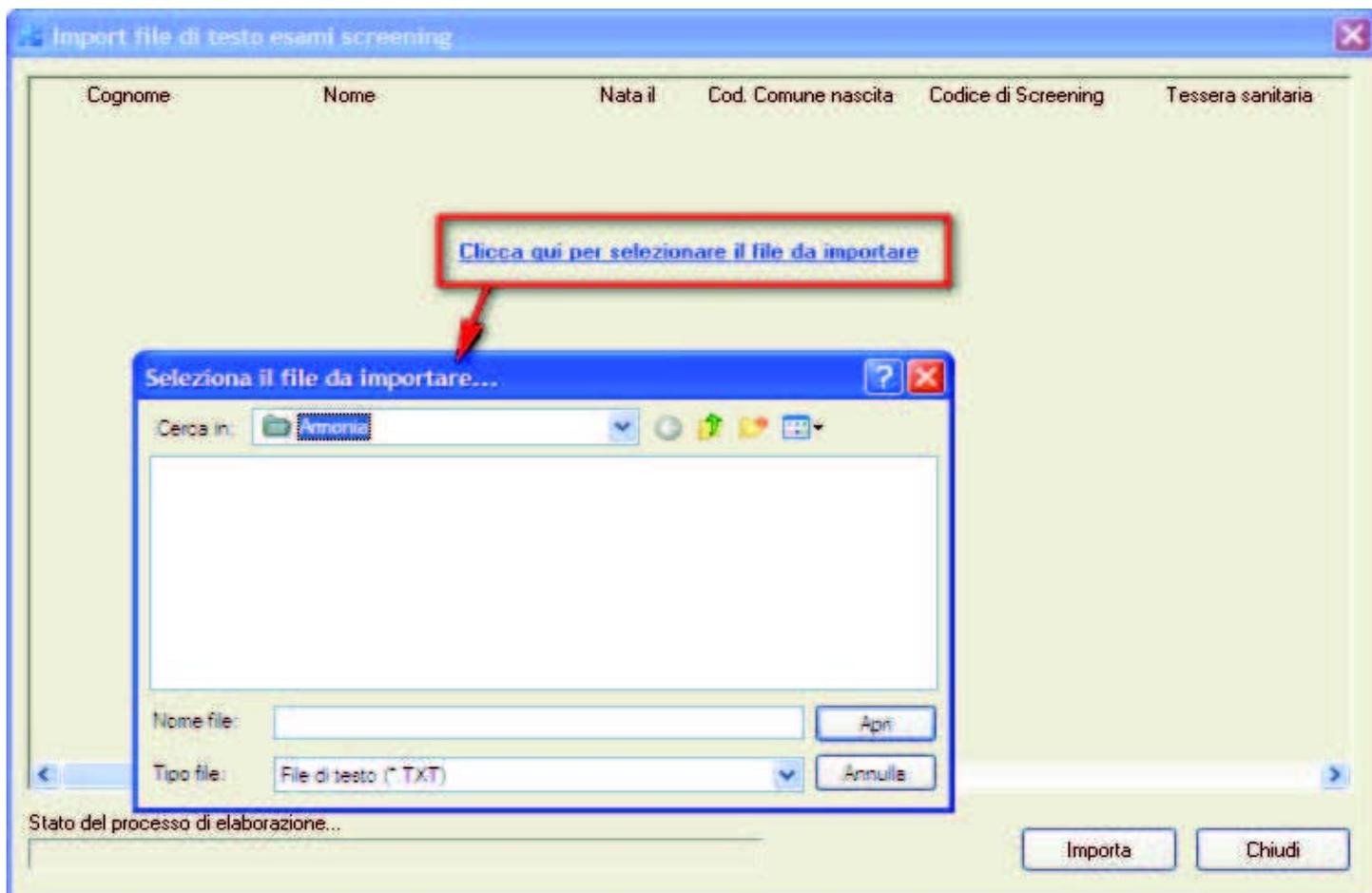

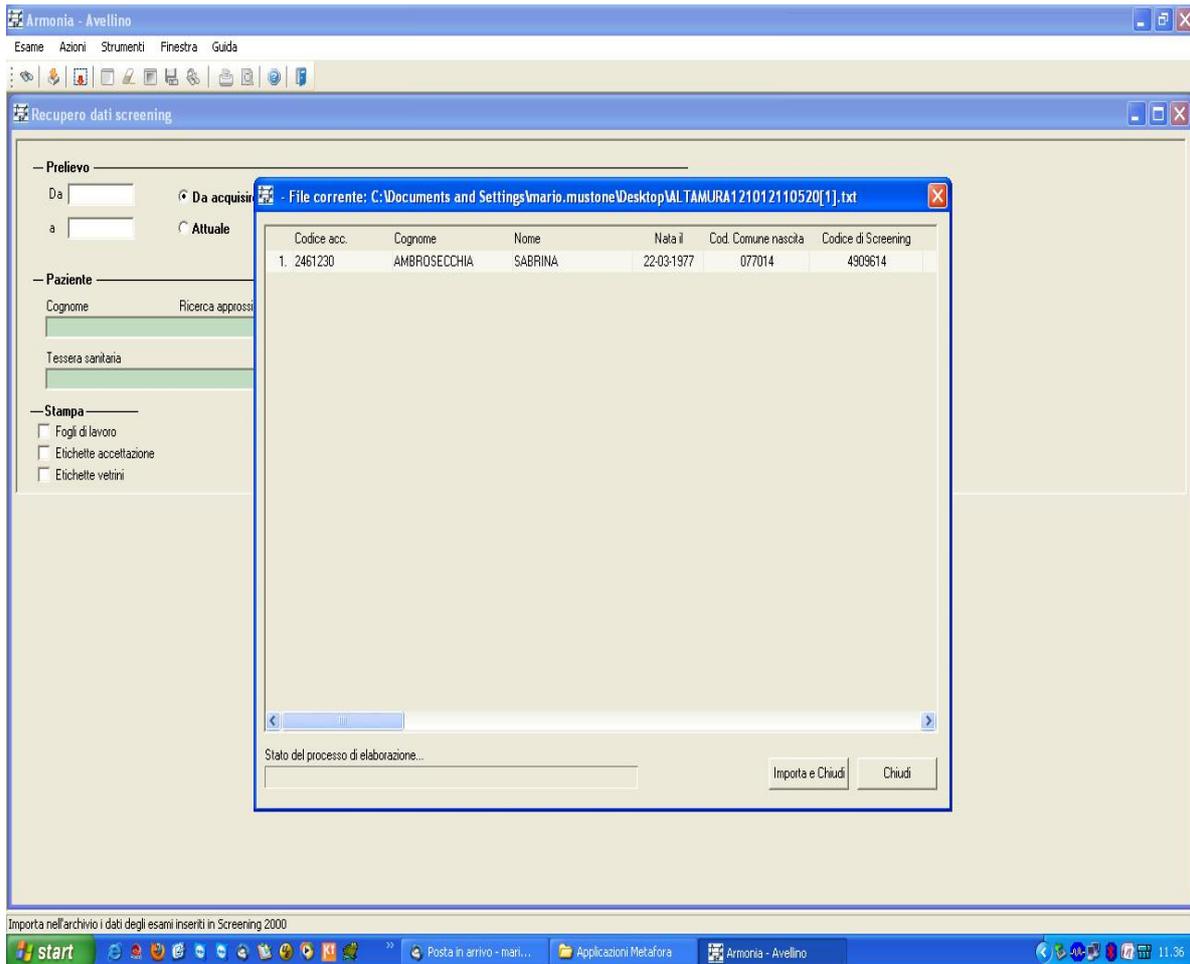

Il sistema visualizza il contenuto del file e cliccando su **"Importa e Chiudi"** i dati vengono importati.

NOTA: Nel caso di ricerca del paziente in anagrafe centrale, se è valorizzata l'anagrafe "Criteri di ricerca pazienti" ed il parametro "Attiva ricerca omonimi" (parametri di sistema → scheda "Generali") è attivo allora, se sono presenti pazienti omonimi, questi vengono visualizzati in modo da permettere all'utente di scegliere se proseguire eventualmente con un accorpamento.

NOTA: dalla release 7.0.0.0 sono stati adeguati i tracciati dei file utilizzati per il recupero e la prenotazioni. I nuovi tracciati prevedono che i campi siano separati da tab. Vedi manuale Anagrafi → parametri di sistema → scheda esame.



Visualizza dati. La funzione consente di visualizzare i dati dei pazienti importati dal file di testo e di selezionare solo i pazienti di interesse (questa è un'importante fase di verifica tra i dati presenti nel file e i vetrini/Thin Prep arrivati nel servizio di A.P.):



Recupera esami. Avvia il recupero solo degli esami selezionati.

2 Istruzioni per il corretto utilizzo dell'Export esami per lo Screening

E' possibile accedere a questa funzione anche dalla Frame-bar cliccando l'icona evidenziata:



La funzione permette la restituzione dei dati di Screening ad Eurosoft via file . La configurazione di questa integrazione viene effettuata in Parametri generali → scheda Esame → pulsante Integr. Screening 2000.

La maschera permette di operare numerosi filtri per selezionare i dati da esportare.

Fra questi vi è lo **Stato**: la scelta può essere fra

Da restituire

Attuale. in questo caso gli stati disponibili sono tutti quelli previsti in Armonia.

Una volta selezionati gli esami (Fig. 1) cliccare il pulsante  per attivare la generazione del file contenente i dati di Screening una volta selezionata l'opzione **Esporta via file di testo** e selezionata la cartella dove si desidera salvare il file eurosoft.txt (Fig. 2).

Cognome e Nome	D. Nascita	N. esame	Data acc.	Fase attuale	Attribuito a...	Tipo esame	Modalità	Regime	Convenzione
MERCIANTE IMMIGRATA	28-11-1978	12-20966	22-10-2012	Accettato		Screening	Integrazione Screening	Esterni	
AMBROSECCHIA SABRINA	22-03-1977	12-20975	30-11-2012	Referato		Screening	Integrazione Screening	Esterni	

Fig. 1

Export esami screening da Armonia

Seleziona la cartella per il file di export

Desktop

- Documenti
- Risorse del computer
- Disco locale (C:)
- Unità DVD-RAM (D:)

OK Annulla

Esporta via tabella sull'archivio = Rilevati per un esame più di 12 codici diagnosti

Esporta via file di testo

Selezione cartella... Cartella corrente: C:\ Nome del file di export: eurosolt.txt

Stato del processo di estrazione informazioni...

Esporta Chiudi

Corrispondono alla ricerca: 2 esami.

Fig. 2