


## MANUALE PER GLI UTENTI DI LABORATORIO

### ACCESSO AL PROGRAMMA

Per accedere ai programmi di screening citologico, mammografico e colonretto bisogna aprire una pagina di internet  e digitare uno di questi indirizzi:

- <http://217.174.120.89/ScreeningPuglia> se ci troviamo all'interno della rete aziendale (intranet)

Una volta digitato l'indirizzo apparirà la seguente schermata



**Dedalus**  
SOFTWARE FOR HEALTHCARE

**Autenticazione Utente**

**Screening**  
**Asl**


 **Operatore**

 **Password**

 **Accedi**

dove bisognerà inserire il proprio nome utente (Operatore) e la propria password (Password), per confermare cliccare sulla spunta verde (o semplicemente premere INVIO sulla tastiera).

All'interno del programma è sempre riportato in alto a destra la descrizione dell'utente che è entrato nel software e l'ambito di appartenenza (citologico, mammografico o colonretto)

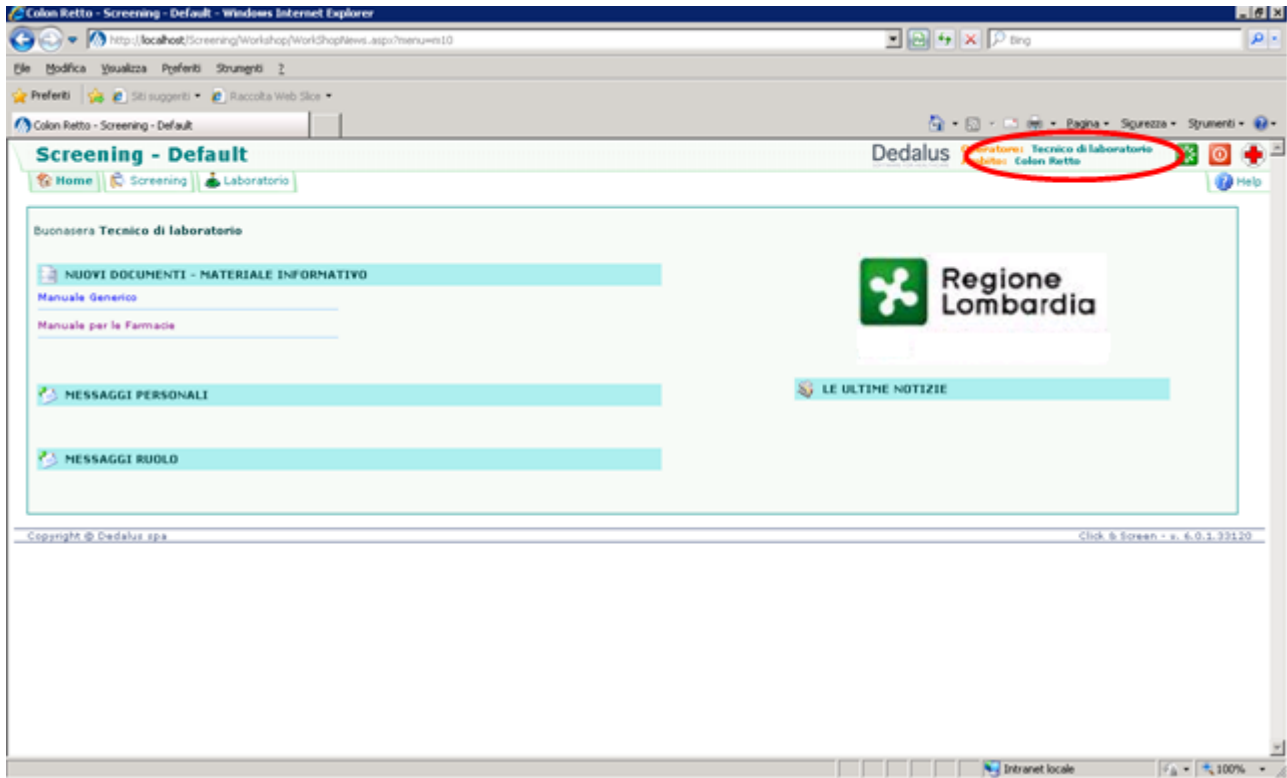


Una volta entrati nello screening Colonretto apparirà la pagina della "Home"

## PAGINA HOME

La prima pagina a cui si accede è quella denominata “Home”


Al suo interno compaiono quattro diverse modalità per riportare notizie o materiale informativo:

- **LE ULTIME NOTIZIE:** dove potranno apparire frasi informative visibili da tutti gli utenti appartenenti allo stesso ambito (cito, mammo o colon)
- **MESSAGGI RUOLO:** dove potranno apparire frasi informative visibili solo ai ruoli a cui si è concessa la visione di tali messaggi
- **MESSAGGI PERSONALI:** dove potranno apparire frasi informative visibili solo agli utenti a cui si è concessa la visione di tali messaggi
- **NUOVI DOCUMENTI – MATERIALE INFORMATIVO:** dove potranno apparire file di qualsiasi genere visibili e scaricabili da tutti gli utenti appartenenti allo stesso ambito

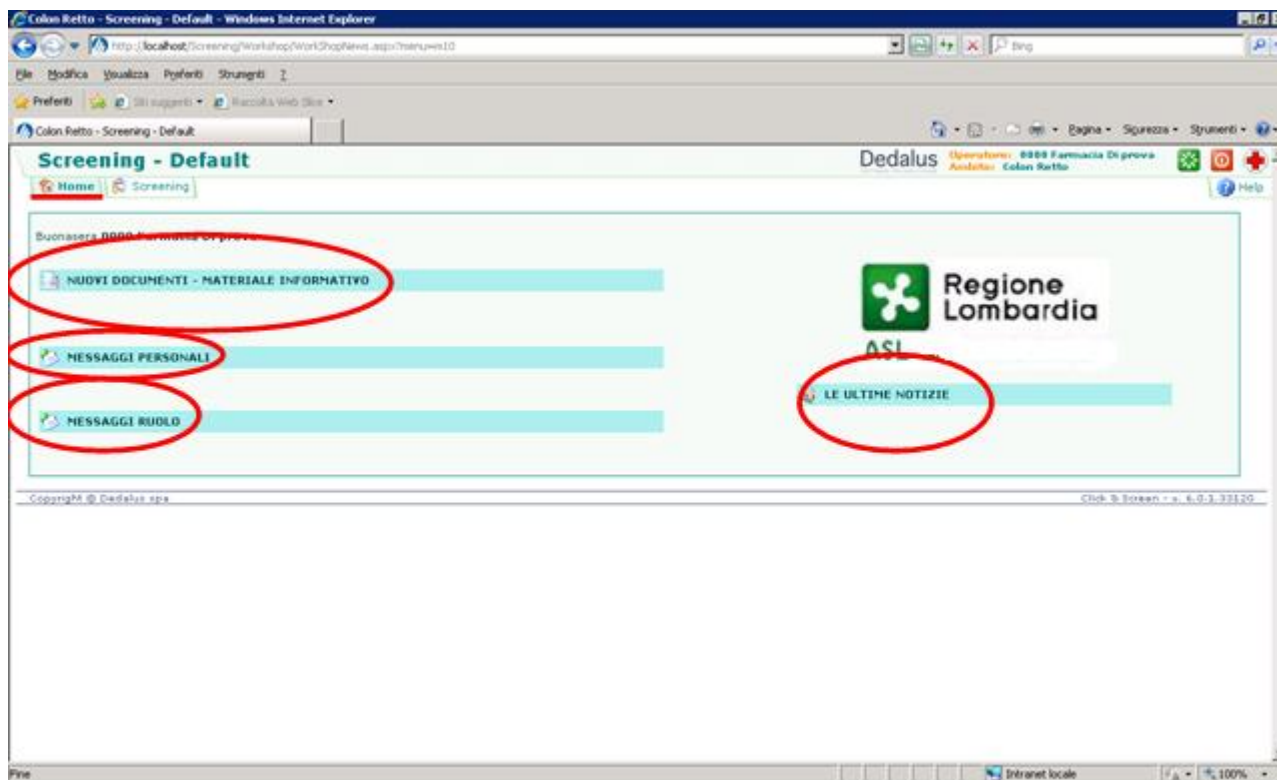


## GESTIONE DEI FOBT DI LABORATORIO

Cliccando sul pulsante “**Laboratorio**” si accede alla scheda di gestione dei campioni letti dallo strumento.

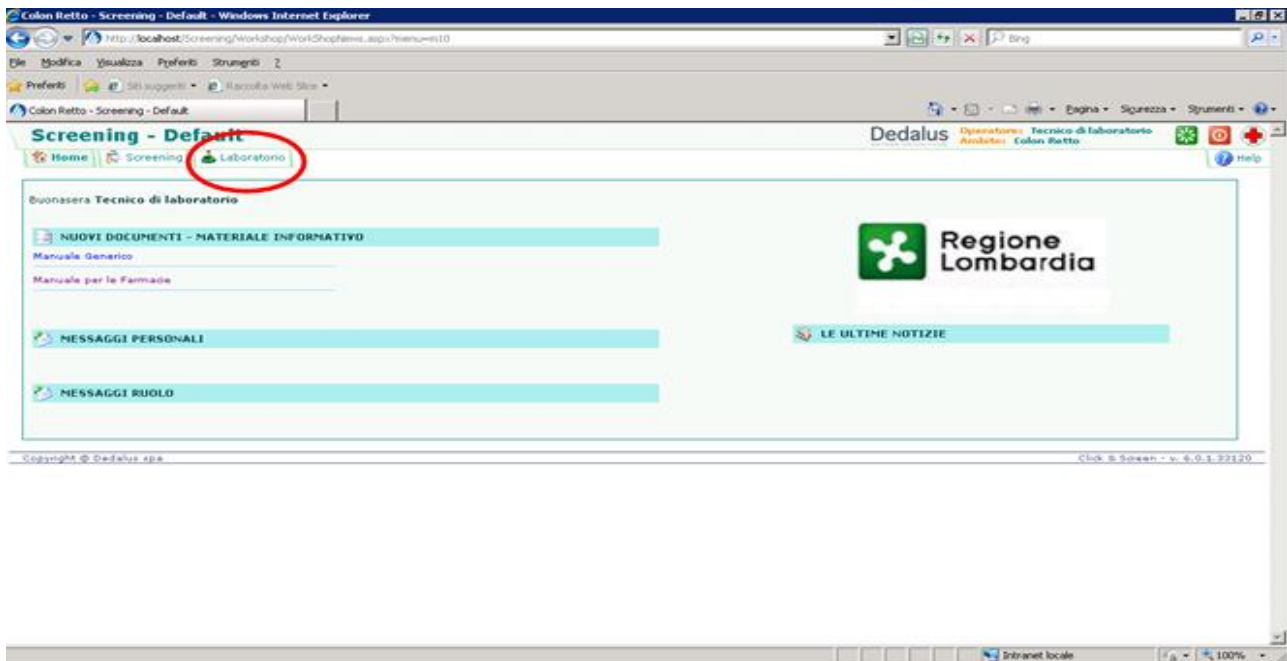

Inserire il laboratorio di appartenenza e lo strumento da cui prelevare i campioni

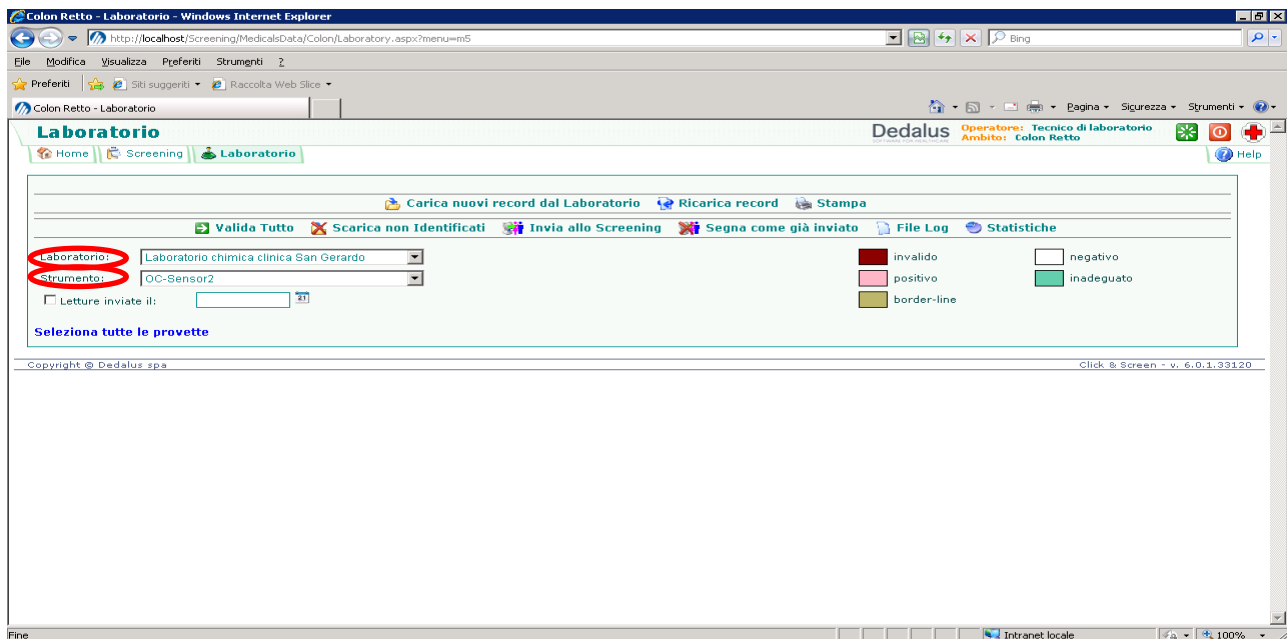

Cliccando sul pulsante “**Carica nuovi record dal Laboratorio**” il programma andrà a cercare nuove letture dello strumento selezionato; in caso positivo darà un messaggio di conferma con il numero delle provette caricate e di sotto le elencherà.

Sono stati importati n°14 nuove provette dal laboratorio!

Conferma

Carica nuovi record dal Laboratorio

Valida Tutto Scarica non Identificati Invia allo Screening Segna come già inviato File Log Statistiche

Laboratorio: Laboratorio chimica clinica San Gerardo Numero Provette:12

Strumento: OC-Sensor2

invalido negativo  
positivo inadeguato  
border-line

Codice Paziente	Paziente	Data Nascita	Tipo Invito	Tipo	Codice Provetta	Data Consegna	Sequenza Strumento	Esito	Risultato	Allarmi	Data Lettura	Letttore	Ripetizione
272198	SALA VITO	09/02/1944	11	S	Y421EX	03/02/2010	515	Negativo - Richiamo al round successivo	13		04/03/2010		
369792	SCERRA DOMENICA	29/11/1952	1	S	Y41MRK	03/02/2010	516	Negativo - Richiamo al round successivo	0		04/03/2010		
3043	ALBORGHETTI MARIA	14/08/1941	1	S	Y43982	03/02/2010	517	Negativo - Richiamo al round successivo	28		04/03/2010		
339272	LONGHI FAZIO	03/07/1957	1	S	Y4363G	03/02/2010	518	Negativo - Richiamo al round successivo	0		04/03/2010		
328149	ZONI PIERA	17/06/1952	1	S	Y439AG	03/02/2010	519	Negativo - Richiamo al round successivo	0		04/03/2010		
181561	MARCONATO GIAN AGOSTINO	20/06/1940	1	S	Y411TY	03/02/2010	520	Negativo - Richiamo al round successivo	7		04/03/2010		
243187	POZZOLI FRANCO	05/10/1943	1	S	Y439BX	03/02/2010	521	Negativo -	99		04/03/2010		

Tramite il pulsante a lato, presente in fondo a ciascun campione, è possibile selezionare la provetta corrente, e modificare, tramite la pagina sottostante, i dati relativi alla lettura.


Salva Invalida Segna come già inviato Torna ad elenco

Provetta n°: ZX333CV del: 12/11/2007 Ripetuto ☐

Allarmi: Sequenza Strumento: 39

Esito: Positivo Risultato Quantitativo: 234

letta il: 23/11/2007 Tecnico di Laboratorio: TCLB Lugo

 **Invalida**  **Valida**

A seconda che la provetta sia **valida o invalida**, sarà visibile uno di questi pulsanti, tramite i quali è possibile rispettivamente invalidare e validare la provetta.

 **Segna come già inviato**

Tramite questo pulsante le letture vengono eliminate dallo schermo senza essere inviate allo screening

Il codice della provetta risulterà modificabile solo se tale codice non è compilato o ha come valore BARCODE ERROR.

 **Ricarica record**

Tramite questo pulsante, vengono aggiornati, per le provette già caricate dal laboratorio e non ancora inviate allo screening, i dati anagrafici e relativi agli accessi di screening.

 **Stampa**


Tramite questo pulsante, vengono stampati i dati presenti a video nella visualizzazione corrente.


 **Valida Tutto**

Tramite questo pulsante è possibile effettuare la validazione di tutte le provette invalide; con tale operazione vengono anche aggiornati la data della lettura con la data odierna ed il lettore con l'operatore che sta effettuando la validazione, se non compilati.

 **Scarica non Identificati**

Tramite questo pulsante è possibile scaricare e memorizzare a parte tutte le provette non riconosciute anagraficamente.

 **Invia allo Screening** Pulsante le letture vengono caricate nello screening, e, se il caricamento viene completato correttamente, vengono flaggate come già inviate.

 **Segna come già inviato**

Tramite questo pulsante le letture selezionate vengono eliminate dallo schermo senza essere inviate allo screening